



NuEra Tight

Habla tu lenguaje corporal

Bienvenido a una nueva era de tratamientos corporales personalizados

No existen dos cuerpos exactamente iguales

Por ello, un plan de tratamiento único ya no es aplicable a todos los casos.

Ahora, puedes dejar atrás todas las limitaciones

La remodelación corporal adquiere un nuevo significado con una solución que cambia las reglas del juego para la reducción de la grasa, el tensado de la piel, la reducción de la celulitis y de las arrugas, todo en un único equipo.

Descubre un nivel de personalización sin precedentes

NuEra® Tight cuenta con la tecnología FocalRF™, que utiliza múltiples frecuencias de radiofrecuencia para ajustar la profundidad de penetración de la energía, teniendo en cuenta diversas indicaciones clínicas, condiciones de la piel y áreas del cuerpo en una misma sesión.




Tecnología FocalRF

Profundidad de tratamiento controlada

Descubre un nuevo nivel de control con la tecnología FocalRF

Utiliza múltiples frecuencias de RF para ajustar la profundidad de penetración de la energía teniendo en cuenta las diferentes indicaciones, las variaciones de grosor del tejido entre las zonas del cuerpo y las necesidades de los clientes.

Elige tu frecuencia

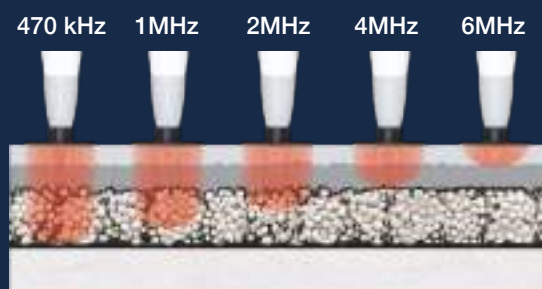

Control de la profundidad

Tratamiento de distintas afecciones cutáneas

Control de los resultados

Mejor control sobre los objetivos clínicos finales

Control de la seguridad

Dirigido a la profundidad óptima del tejido



Herramienta avanzada para la consulta moderna

Lumenis ha desarrollado NuEra Tight con las funciones más avanzadas en un dispositivo fácil de usar con una interfaz gráfica de usuario intuitiva. La selección de los parámetros de tratamiento adecuados está a sólo un toque de distancia.



NuLogic

Protocolo avanzado para usuarios expertos

Exclusivo protocolo de tratamiento

Varios protocolos de tratamiento aplicados de forma automática en una única sesión de tratamiento.

Un nuevo nivel de personalización

Ajusta múltiples valores de frecuencia, temperatura, tiempo y tamaño del electrodo.



NuAPIC

Control de la temperatura personalizado y automático

Garantiza la temperatura terapéutica durante el procedimiento. Adapta la potencia para satisfacer las necesidades específicas del paciente.

Reconocimiento automático de accesorios

Electrodos de múltiples tamaños

Ocho electrodos de Transferencia de Energía Capacitiva Revestida (CCET) para adaptarse perfectamente a cualquier parte del cuerpo, mejorar la comodidad del tratamiento y optimizar la distribución uniforme de la energía.

Aplicadores

Tres aplicadores ergonómicos y ligeros: CORPORAL, FACIAL y BIPOLAR.




La remodelación corporal adquiere un nuevo significado

La radiofrecuencia (RF) se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, ya que los usuarios desean modelar las áreas problemáticas de forma cómoda y sin tiempo de inactividad. NuEra Tight con tecnología FocalRF utiliza 5 frecuencias diferentes para marcar la profundidad de penetración de la energía al calentar distintas capas específicas de la piel y del tejido logrando una reducción de grasa, tensado de la piel, reducción de la celulitis y de las arrugas, todo en un solo dispositivo

Reducción de grasa


Una experiencia de remodelación corporal totalmente personalizada comienza con la tecnología FocalRF que trata la grasa subcutánea en cualquier región del cuerpo de forma fácil y eficaz. Elige un tratamiento superficial a 2MHz para eliminar las células grasas resistentes o selecciona 470kHz para un calentamiento más profundo.

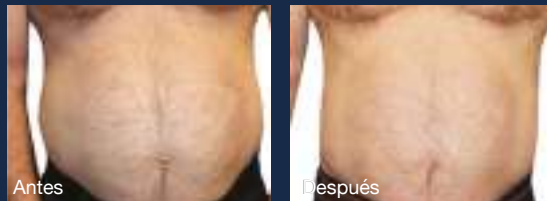

Cortesía de Jeffrey Caruth, M.D.

Tensado de la piel

NuEra Tight regula automáticamente la temperatura en el tejido cutáneo hasta el grado requerido estimulando el colágeno, mejorando los signos de flacidez de la piel y las arrugas. Desde grandes zonas corporales hasta zonas faciales más pequeñas, la tecnología FocalRF dirige la penetración de la energía a la capa de la dermis, garantizando tratamientos seguros y eficaces.

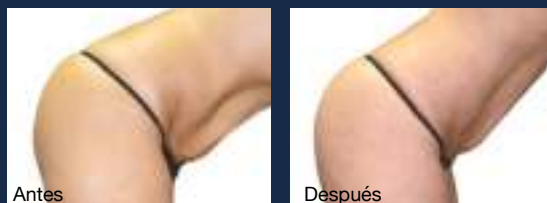

Cortesía de Luigi Rizzi, M.D.

Reducción de la celulitis


Gracias a la tecnología FocalRF, NuEra Tight aplica múltiples frecuencias, dos modos de tratamiento y un eficaz masaje mecánico para alcanzar el tejido conectivo, con el fin de remodelar la celulitis y mejorar el aspecto de las protuberancias y los hoyuelos.



Cortesía de Clark Schierle, M.D., Ph.D., FACS

Reducción de arrugas

Con altas frecuencias y un control preciso de la temperatura, NuEra Tight es capaz de estimular la actividad de los fibroblastos y mejorar el flujo sanguíneo, creando un efecto de alisamiento inmediato que seguirá mejorando a medida que el mecanismo de regeneración del cuerpo reactive una nueva producción de colágeno.

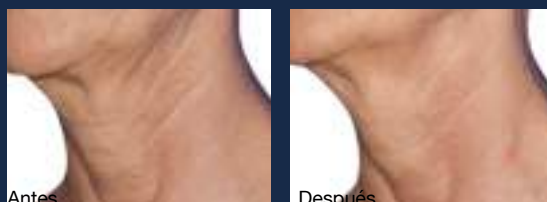

Cortesía de Gerhard Sattler M.D.

Aumenta tu rentabilidad con NuEra Tight

La demanda es clara. Los usuarios quieren tratamientos rápidos, cómodos, resultados duraderos y de aspecto natural. Con NuEra Tight podrás satisfacer esta demanda y superar las expectativas, proporcionando una solución independiente para la reducción de la grasa, el tensado de la piel, mejora de la celulitis y la reducción de las arrugas. Si lo combinas con otras modalidades NuEra Tight te ayudará a crear ventajas para tu negocio. Lo mejor de todo es que NuEra Tight no requiere consumibles costosos, por lo que no hay nada que te impida alcanzar su ROI.



Escucha a nuestros clientes

"Los tratamientos de radiofrecuencia se encuentran entre las terapias estéticas más solicitadas en la actualidad. NuEra Tight con tecnología FocalRF es altamente personalizable con una amplia selección de frecuencias y accesorios que proporcionan tratamientos rápidos, cómodos y no invasivos. Esto hace que mis pacientes consigan la mejora deseada en su aspecto, al tiempo que se garantiza la seguridad y la eficacia gracias a la función de control de la temperatura de NuAPIC. Este dispositivo es indoloro pero eficaz en el contorno corporal, un gran cambio para mis clientes."

Macrene Alexiades-Armenakas, M.D., Ph.D., FAAD, Dermatólogo Clínico, Cirujano Láser, Dermatólogo Investigador, New York.

Especificaciones

Frecuencia de emisión de la tecnología FocalRF ($\pm 1\%$)	470 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 6 MHz
Potencia de salida ($\pm 10\%$)	250 W
Pantalla táctil LCD	15"
Sistema de acoplamiento	Capacitivo
Modo de funcionamiento	Preajustes de tratamiento automático, NuLogic y manual
Control de la temperatura	NuAPIC
Rango de temperatura	De 35°C a 45°C $\pm 1^\circ\text{C}$
Temporizador	Hasta 90 min.
Red eléctrica	100-240 Vac; 50/60 Hz; 350 W
Dimensiones	127x55x60 cm (HxWxD)
Peso	40 kg
Clase de seguridad	Clase I - tipo BF
Piezas de mano	Rostro y cuerpo, bipolar
Electrodos de retorno	Almohadilla de retorno desechable
Electrodos con revestimiento capacitivo	$\varnothing 20$ mm, $\varnothing 30$ mm, $\varnothing 40$ mm, $\varnothing 60$ mm, $\varnothing 70$ mm, $\varnothing 80$ mm, $\varnothing 100$ mm, $\varnothing 40$ mm con masaje

NuEra Tight 1CH ha sido diseñada para:

- Tratamiento de la paniculopatía edemato-fibroesclerótica (PEFE celulitis)
- Tratamiento de la atrofia y elastosis de la piel
- Tratamiento de la microcirculación y la insuficiencia venosa
- Tratamiento de hiperplasia e hipertrofia de adipocitos

Advertencias y riesgos: NuEra Tight no es recomendable para personas que estén embarazadas, tengan una infección o enfermedad, o sean sensibles al calor. Se debe evitar el tratamiento en cortes, heridas, piercings y tatuajes, así como se deben dejar las áreas con rellenos inyectables y toxinas durante un mes antes del tratamiento. Los pacientes con un implante metálico o un dispositivo implantado (por ejemplo, marcapasos) deben consultar primero a un médico cualificado. Si se le considera apto, la almohadilla de retorno debe colocarse lejos del implante. Los anestésicos locales, orales o sistémicos no pueden usarse antes o durante el tratamiento, ya que los pacientes deben hablar constantemente para garantizar su comodidad continua. Aísle a los pacientes de los objetos metálicos, especialmente los que estén en contacto directo (por ejemplo, la cama). Se recomienda siempre consultarlo con su médico; para conocer las contraindicaciones y los riesgos en su totalidad, consulte el manual de usuario de NuEra Tight.