

DENSITY



DENSITY

- Tecnología de calentamiento secuencial mono y bipolar
- Sistema de retroalimentación automática de impedancia
- Ajuste de enfriamiento de 5 niveles



NUEVA ALPHA TIP (MONO X BI)

La punta ALPHA TIP transmite energía a una zona más amplia y a capas más profundas gracias al mayor tamaño de su electrodo.



Cobertura de toda el área
2*2cm (4cm²)

Distribución de energía más amplia
gracias al mayor tamaño de los electrodos

Para facial




Tamaño de electrodo ampliado

Para corporal

HIGH TIP (MONO X BI)


HIGH-B TIP

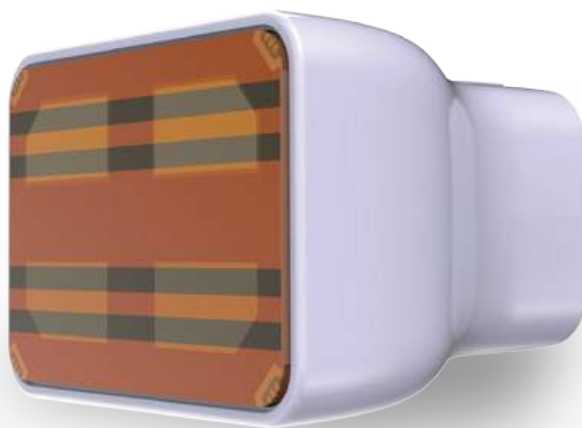

Cobertura de área amplia
5*3.2cm (16cm²)


Tecnología de calentamiento secuencial

La tecnología patentada de calentamiento secuencial suministra energía de radiofrecuencia (RF) monopolar y bipolar de hasta 400 W, tanto a las capas profundas como a las superficiales.

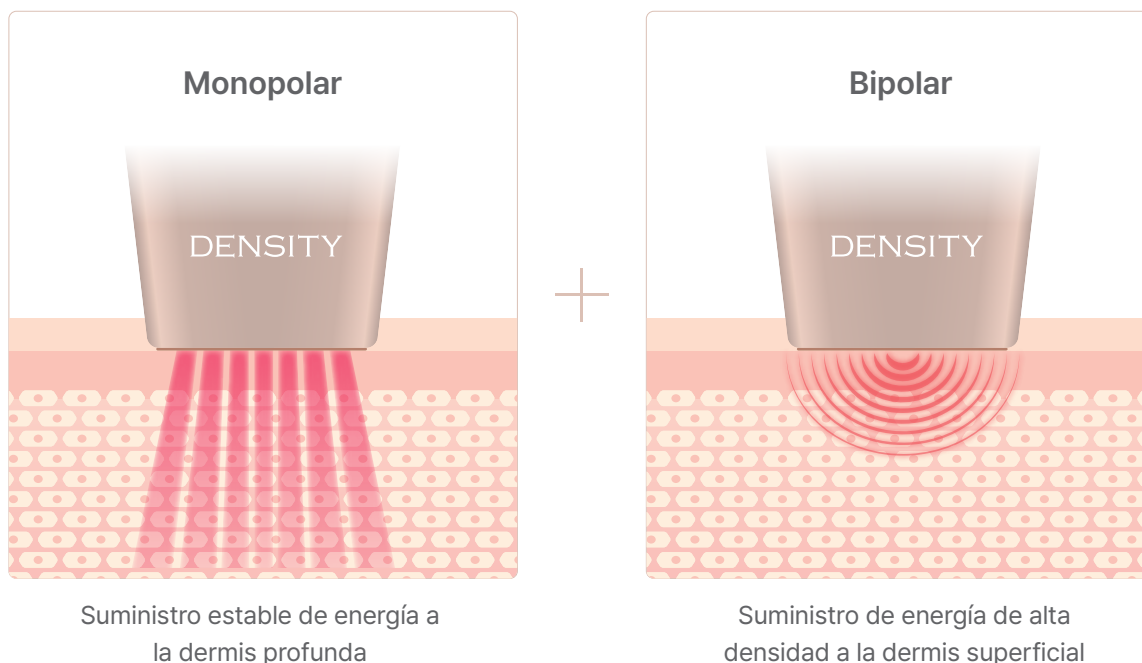


Calibración de impedancia

Detecta continuamente los cambios en la impedancia de la piel y ajusta instantáneamente la salida, garantizando un suministro de energía constante y preciso durante todo el procedimiento.

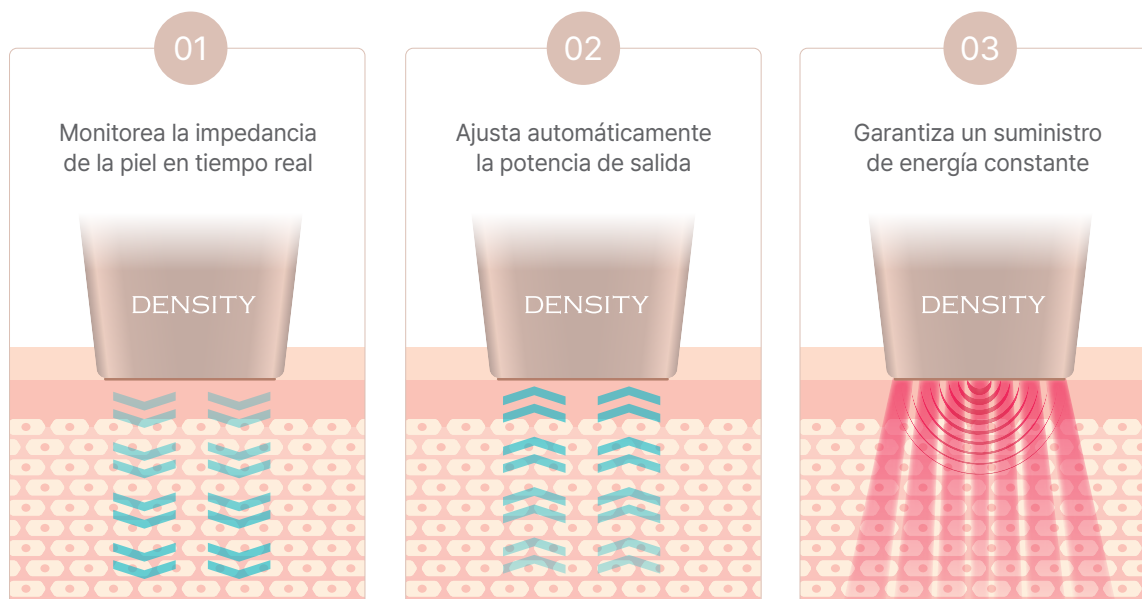

Enfriamiento ajustable y fluido

El sistema de refrigeración de 5 niveles, ajustable de forma independiente, protege la piel del daño térmico, permitiendo realizar tratamientos delicados adaptados a cada tipo de piel.

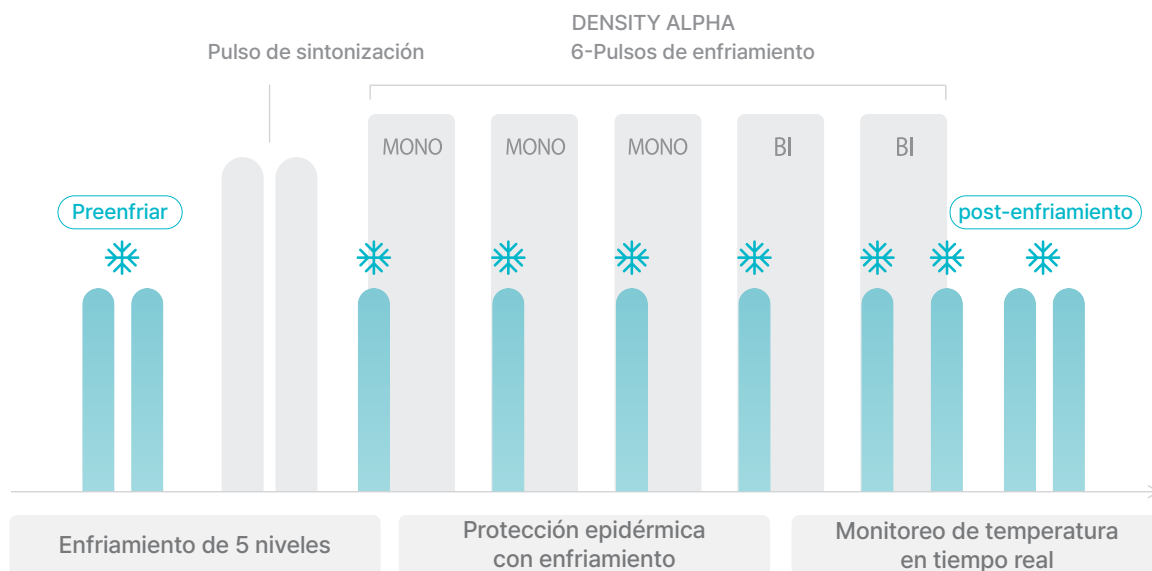

La disponibilidad y las especificaciones de Cooling Pulse varían según el país y la región. Para obtener información detallada, comuníquese con su gerente regional.

Pieza de mano, diseñada para la comodidad

La pantalla LCD permite monitorear en tiempo real la temperatura de la piel, el recuento de disparos y la salida de energía, a la vez que facilita el ajuste de los niveles de energía y los modos.



DENSITY

Impulsado por la tecnología de calentamiento secuencial de radiofrecuencia MONO+BI con una potencia de hasta 400 W, retroalimentación de impedancia en tiempo real y un sistema de enfriamiento personalizable de 5 niveles, el dispositivo garantiza un suministro de energía estable y preciso para tratamientos personalizados.

1

Monopolar X Bipolar

Aplicación de radiofrecuencia (RF) mono y bipolar en un solo disparo, posible gracias a la tecnología patentada de calentamiento secuencial.

2

Retroalimentación de impedancia en tiempo real

Suministro preciso de energía mediante la medición de impedancia en tiempo real, adaptado a las condiciones de la piel del paciente.

3

Sistema de enfriamiento ajustable y suave de 5 niveles

Pulsos de enfriamiento personalizados según el tipo de punta y enfriamiento ajustable en 5 niveles para un tratamiento a medida.

4

Usabilidad mejorada

Mayor comodidad para el profesional gracias al modo automático, un soporte específico para cables y un amplio espacio de almacenamiento.



DENSITY

Un único dispositivo integra radiofrecuencia (RF) tanto monopolar como bipolar, lo que permite realizar ajustes precisos de modo y potencia adaptados a las condiciones de la piel y a los planes de tratamiento.

Especificaciones

Modelo	DENSITY Noir
Frecuencia de salida	6.78MHz
Tipo de RF	Mono-polar / Bi-polar
Potencia max.	Max 400W
Number de pulsos	5 Pulses
Tips	ALPHA Tip, High-F Tip, High- E Tip, High-B Tip Classic-F Tip, Classic-E Tip, Classic-B Tip
Dimensiones	W 521 x L 624 x H 1373 mm
Peso	52kg
Consumo	100 ~ 240 V (50-60Hz), 1000VA



Escanea o visita para
saber más

Jeisys

Jeisys Medical Inc. 3F, 4F, 159, Gasan digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, 08506, Korea

Website : www.jeisys.com Tel : +82 2 2603 6417 Fax : +82 2 2603 6447 Email : sales@jeisys.com [R02B-C-ALPA01]



IMVMED
Ingeniería Médica de Vanguardia