

miraDry[®]

EL SUDOR ACABA AQUÍ

**Reduce de forma permanente
el sudor y el olor axilar^{1,2}**

- 💧 Resultados inmediatos
- 💧 Tan sólo un tratamiento
- 💧 Tratamiento cómodo de solo 1 hora



IMVMED
Ingeniería Médica de Vanguardia



miraDry®

CIENTÍFICAMENTE VALIDADO.

Una tecnología innovadora, y no invasiva, que elimina de forma segura las glándulas sudoríparas de las axilas para reducir significativamente el sudor y olor no deseado.

- ✓ Eficacia duradera y estable
- ✓ Alto nivel de seguridad
- ✓ Resultados inmediatos
- ✓ Downtime mínimo o ninguno
- ✓ No invasivo

FÁCIL DE USAR Y DELEGAR



Pieza de mano

Se succiona la piel desde las estructuras más profundas, facilitando el máximo contacto con la superficie hidrocerámica de refrigeración.



Uso intuitivo

El sistema de guía de tratamiento facilita al operador tanto el aprendizaje como el tratamiento.

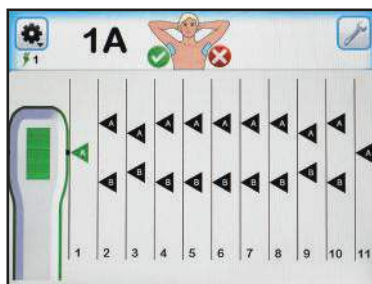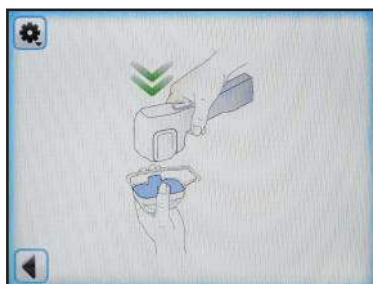

bioTip™

Estabiliza el tejido y permite el paso de energía sin obstáculos. Esterilizado para la seguridad del paciente.



CLÍNICAMENTE PROBADO. ÚNICO EN EL MERCADO.


El sistema miraDry utiliza energía térmica focalizada en las glándulas sudoríparas y odoríferas de las axilas para eliminarlas. Una vez eliminadas estas glándulas, no vuelven a regenerarse.

miraDry® funciona administrando energía electromagnética de control preciso a la zona de las axilas para eliminar las glándulas sudoríparas

FOCALIZADO DE FORMA PRECISA PARA LOGRAR LA MÁXIMA EFICACIA

Tecnología patentada miraWave™ crea una consistente zona de interconexión focalizada entre hipodermis y tejido adiposo que disminuye el sudor y el olor en solo un tratamiento.^{1,2}

Al mismo tiempo, el enfriamiento con el sistema hidrocerámico protege la epidermis y la dermis superior.

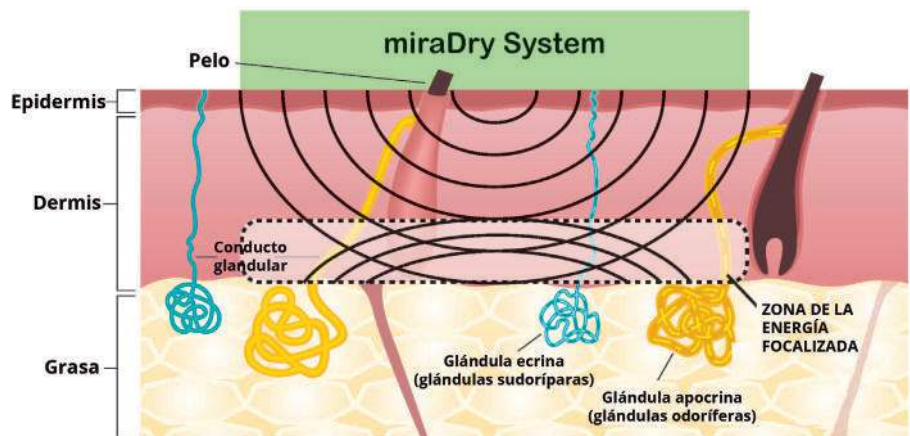

TRATAMIENTO RÁPIDO EN 3 PASOS



1. Anestesiarse la zona de tratamiento



2. Aplicar la plantilla



3. Tratar con miraDry

DEMOSTRADO PARA LA REDUCCIÓN PERMANENTE DEL SUDOR Y DEL OLOR

Antes y después del tratamiento miraDry

Con el Test Minor se observa el oscurecimiento en zonas donde el sudor es abundante antes del tratamiento y la falta de oscurecimiento después del tratamiento.

Miramar Labs, Inc.




Datos histológicos muestran las glándulas sudoríparas normales, las glándulas sudoríparas con necrosis, y la ausencia de glándulas sudoríparas en 6 meses.

Las muestras - cortesía Dr. Kushikata.




Solución duradera – Resultados clínicos a 2 años¹

Reducción del sudor a largo plazo¹ % de pacientes sin sudor molesto

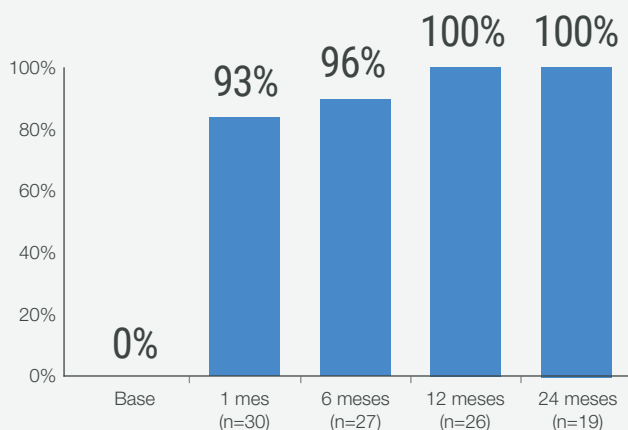


Reducción del olor a largo plazo¹ % de pacientes sin olor molesto

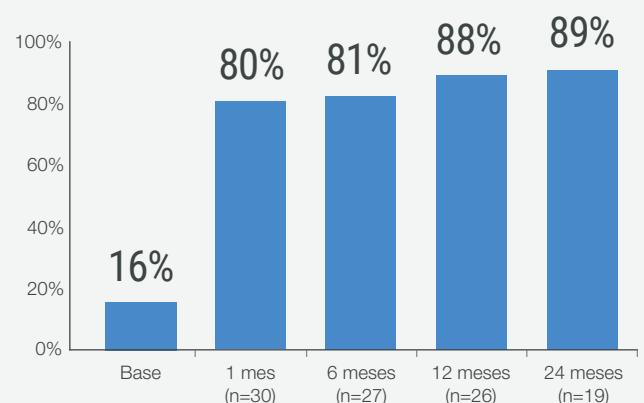

IMAGINA PODER OFRECER A TUS PACIENTES UNA VIDA SIN SUDOR Y OLOR EXCESIVOS DE LAS AXILAS^{1,2}

El primer y único dispositivo, aprobado por FDA y CE, para el tratamiento permanente del sudor y olor axilar en solo 1 hora.

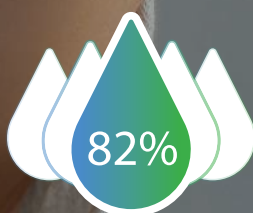

82% de reducción en el sudor de las axilas⁵




Más de 125,000 tratamientos en todo el mundo²



90% RealSelf "VALE LA PENA" calificación de usuarios⁴


ATRAE NUEVOS PACIENTES A SU CLÍNICA

PACIENTES NUEVOS

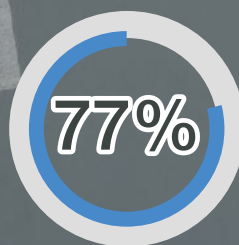


El 77% de los pacientes interesados en MiraDry son novatos en tratamientos estéticos³

PACIENTES JOVENES

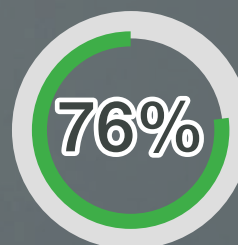

El 76% de los consumidores preocupados por el sudor son menores de 40 años.³

INTERÉS DIVERSO

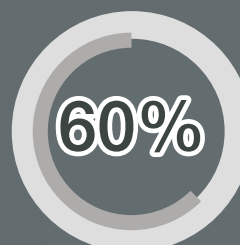

60% mujeres: 40% hombres - amplio interés de mercado tanto de hombres como de mujeres³



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia de emisión de microondas	• 5.8 GHz
Entrega de energía de microondas	• 5 puntos de ajuste definidos por el fabricante (rango del 25%)
Refrigeración	• Sistema de refrigeración integrada con agua desionizada a 15°C
Vacuum	• De -508 a -559 mmHg
Corriente / Voltaje	• 100-240V AC 50/60 Hz • 10.56 Amps a 100 Volts, 8.8 Amps a 120 Volts, 4.4 Amps a 240 Volts
Dimensiones	Con la pantalla plegada: • 1.19m de alto x 0.52m de ancho x 0.81m de fondo • 0.90m de alto x 0.52m de ancho x 0.81m de fondo
Peso	• 51 kg
Conformidad	• 5 estándares internacionales (FDA, CE...)



IMVMED
Ingeniería Médica de Vanguardia

1. Li et al. Antigen expression of human eccrine sweat glands. J Cutan Pathol 36: 318-324 (2009). Lupin et al. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatol Surg 40: 805-807 (2014). 2. Data on file. miraDry, Inc. 3. Data on file. miraDry Inc. Quantitative survey of 2,265 U.S. consumers, 18-75, HHI > \$35,000 4. RealSelf miraDry "Worth It" ratings over all time, sourced January 16, 2018 5. Hong et al. Clinical Evaluation of a Microwave Device for Treating Axillary Hyperhidrosis. Dermatol Surg 38:728-735 (2012).

Los resultados y la experiencia del paciente pueden variar. El sistema miraDry está aprobado por la FDA para el tratamiento del sudor y el olor no deseados en las axilas, así como para la eliminación permanente del vello no deseado en las axilas. Fuera de los EE.UU., el sistema miraDry está destinado a ser utilizado por profesionales de la salud para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar primaria en adultos.

© 2018 miraDry, Inc. Todos los derechos reservados.
miraDry®, freshEvent™, miraWave™, bioTip™ y Sweat Stops Here™ son marcas registradas de miraDry, Inc.
MK0652.B

miraDry®

miraDry.com